


SYSTEM ZDROWEGO SIEDZENIA:

Warunkiem prawidłowego działania Systemu jest poprawne dopasowanie krzesła do sylwetki.

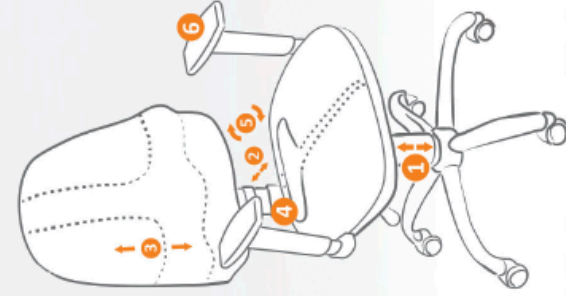

1 Za pomocą pierwszej dźwigni po prawej stronie dopasuj wysokość amortyzatora, stopy powinny swobodnie spoczywać na ziemi.

2 Za pomocą pierwszej dźwigni umieszczonej z lewej strony siedziska dopasuj odległość siedziska od oparcia (przód, tył), pamiętając że guzy kulszowe powinny znaleźć się we wgłębieniach siedziska (dotyczy tylko modelu CLASSIC PRO).

3 Za pomocą śruby umieszczonej z tyłu fotela po lewej stronie dopasuj wysokość oparcia, tak aby wałek lędźwiowy znalazł się na wysokości tali.

4 Za pomocą drugiej dźwigni umieszczonej z prawej strony siedziska dopasuj nachylenie oparcia stosownie do potrzeby.

5 Za pomocą drugiej dźwigni umieszczonej po lewej stronie regulujemy kąt nachylenia oparcia wraz z siedziskiem.

6 Za pomocą przycisku umieszczonego po stronie zewnętrznej tóż pod nakładką podłokietnika regulujemy jego wysokość (dotyczy tylko modelu CLASSIC PRO).

Krzesła, ze względu na opatentowany sposób wyprofilowania oparcia **czynnie wymuszają** wyprostowaną pozycję podczas siedzenia. **Specjalny kształt siedziska** pozwala na **odciążenie guzów kulszowych**, co powoduje powrót miednicy do prawidłowej, fizjologicznej pozycji.

Uwaga: Prosimy pamiętać, że krzesło należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Jest ono przeznaczone dla jednej osoby. Nie wolno na nim stawać. Nie należy pozostawiać w miejscach o dużej wilgotności powietrza czy też w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła.

Maksymalne obciążenie dla krzesła wynosi 110 kg.

Demontaż lub montaż jakichkolwiek elementów krzesła może spowodować utratę gwarancji, oraz niewłaściwe działanie medyczne krzesła.

Producent udziela 24 miesięcy gwarancji na elementy mechaniczne oraz wady ukryte powstające w momencie produkcji.

Reklamacje należy zgłaszać pod nr tel. 0-12 411 22 23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

System, według którego skonstruowane są nasze krzesła, został zgłoszony w urzędzie patentowym. Krzesła są zarejestrowane jako Wyrób Medyczny w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie.



KULIK SYSTEM
WWW.KULIKSYSTEM.COM

**KRZESŁO PROF. REHABILITACYJNE K1
MODEL CLASSIC I CLASSIC PRO***

INFORMACJE O PRODUKCIE / INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU



Przed użyciem zapoznaj się z opisem produktu, instrukcją użytkowania oraz treścią, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych oraz informacje dotyczące używania wyrobu medycznego. Stosowanie podanych wskazówek przy codziennej eksploatacji produktu pozwoli na jego długotrwałe i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie. Wydanie II CZERWIEC 2015.

BIURO HANDLOWE KULIK SYSTEM
ul. Kasprowicza 32 31-523 Kraków

