


SYSTEM ZDROWEGO SIEDZENIA:

Warunkiem prawidłowego działania Systemu jest poprawne dopasowanie fotela do sylwetki.

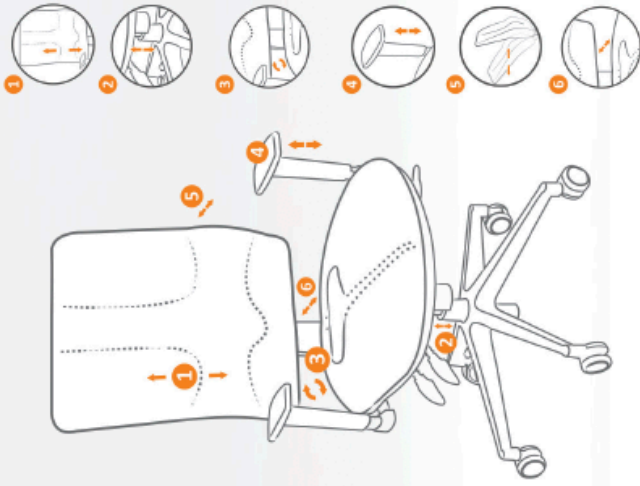

1 Wysokość oparcia

Oburącz chwycić za oparcie i podnieść je maksymalnie do góry, potem opuścić w dół. Delikatnymi ruchami umieścić oparcie do góry i zablokować na wybranej wysokości.

2 Wysokość siedziska

Usiądź na siedzisku, pociągnij dźwignię z prawej strony siedziska w górę (siedzisko będzie się powoli obniżało).

3 Kąt nachylenia oparcia i siedziska

Pociągając drugą dźwignię po prawej stronie siedziska maksymalnie do góry, odchył się do tyłu do momentu uzyskania odpowiedniego kąta nachylenia. Opuszczając dźwignię blokujemy w wybranej pozycji (oparcie odchyła się synchronicznie z siedziskiem).

4 Regulacja wysokości podłokietnika

Za pomocą przycisku umieszczonego po zewnętrznej stronie tóż pod nakładką podłokietnika regulujemy jego wysokość (górze dół).

5 Regulacja oporu odchylenia oparcia

Przekreć śrubę pod siedziskiem w jedną bądź w drugą stronę (oparcie będzie łatwiej lub mocniej się odchylać).

6 Wysuw siedziska

Usiądź na siedzisku, podciągnij pierwszą dźwignię z lewej strony ku górze, wysuń siedzisko do przodu.

Fotele, ze względu na opatentowany sposób wyprofilowania oparcia **czynnie wymuszają** wyprostowaną pozycję podczas siedzenia. **Specjalny kształt siedziska** pozwala na **odciążenie guzów kulszowych**, co powoduje powrót miednicy do prawidłowej fizjologicznej pozycji.

Uwaga: Prosimy pamiętać, że fotel należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Jest on przeznaczony dla jednej osoby. Nie wolno na nim stawać. Nie należy pozostawiać w miejscach o dużej wilgotności powietrza czy też w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła.

Maksymalne obciążenie dla fotela wynosi 130 kg.

Demontaż lub montaż jakichkolwiek elementów fotela może spowodować utratę gwarancji, oraz niewłaściwe działanie mechaniczne fotela.

Producent udziela 24 miesięcy gwarancji na elementy mechaniczne oraz wady ukryte powstałe w momencie produkcji.

Reklamacje należy zgłaszać pod nr tel. 0-12 411 22 23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.


System, według którego konstruowane są nasze fotele, został zgłoszony w urzędzie patentowym. Fotele są zarejestrowane jako Wyrób Medyczny w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie.



KULIK SYSTEM
WWW.KULIKSYSTEM.COM

**KRZESŁO PROF. REHABILITACYJNE K3
KULIK SYSTEM® MODEL BUSINESS**

INFORMACJE O PRODUKCIE / INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU

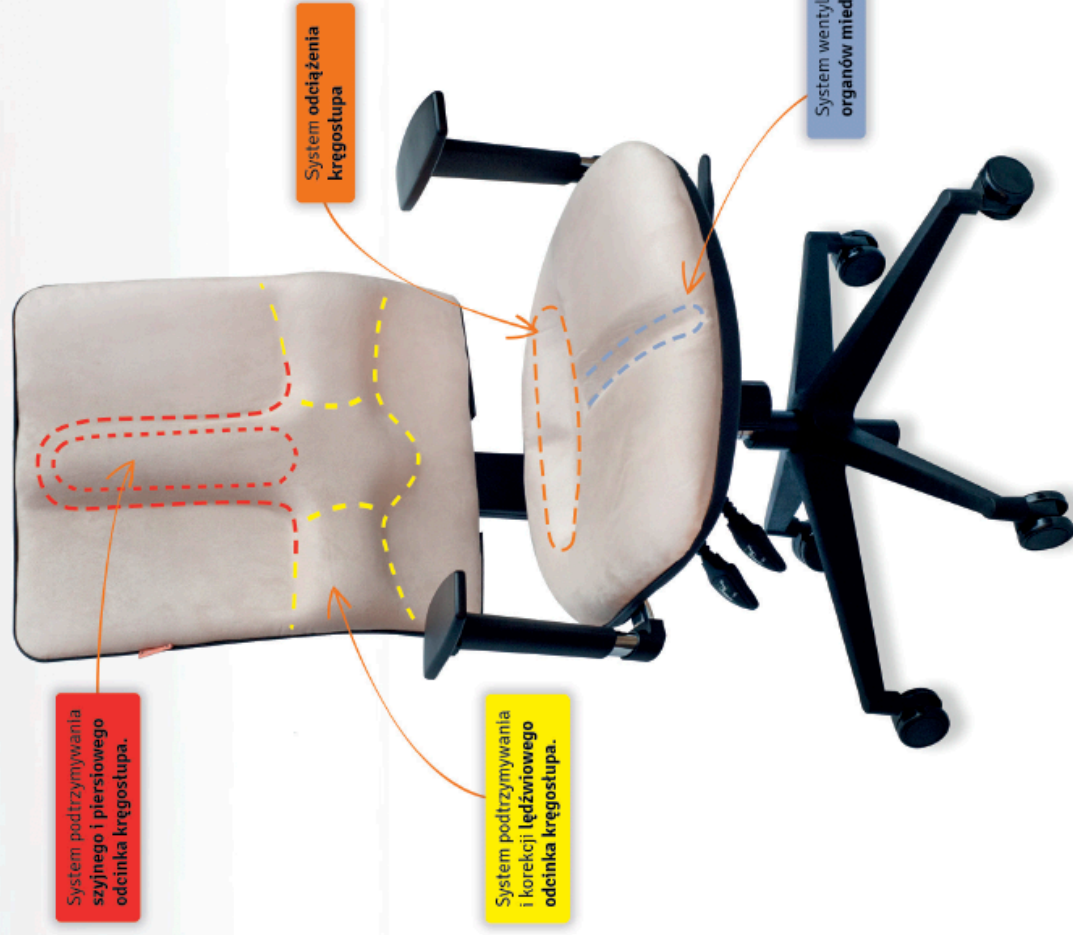

System podtrzymywania szyjnego i piersiowego odcinka kręgosłupa.

System podtrzymywania i korekcji lędźwiowego odcinka kręgosłupa.

System odciążenia kręgosłupa

System wentylacji organów miednicy.

BIURO HANDLOWE KULIK SYSTEM
ul. Kasprzowicza 32 31-523 Kraków



Przed użyciem zapoznaj się z opisem produktu, instrukcją użytkowania oraz treścią, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych oraz informacje dotyczące używania wyrobu medycznego. Stosowanie podanych wskazówek przy codziennej eksploatacji produktu pozwoli na jego długotrwałe i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie. Wydanie II CZERWIEC 2015.