


## SYSTEM ZDROWEGO SIEDZENIA:

Warunkiem prawidłowego działania Systemu jest poprawne dopasowanie fotela do sylwetki.

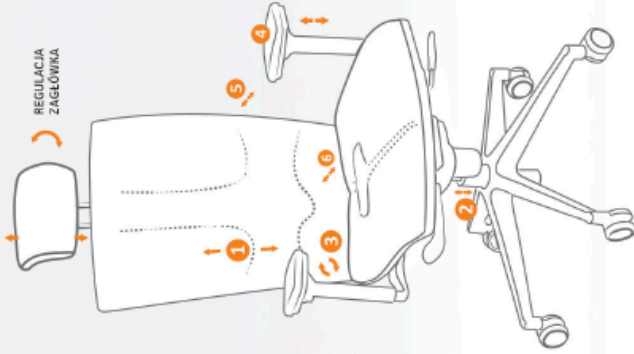

### Wysokość oparcia / Podwyższenie oparcia:

Oburącz chwycić za oparcie i podnieść je maksymalnie do góry, potem opuścić w dół. Delikatnymi ruchami unieść oparcie do góry i zablokuj na wybranej wysokości.

### Wysokość siedziska

Usiądź na siedzisku, podciągnij motylek umieszczony na dzwigni z prawej strony siedziska w górę (siedzisko będzie się powoli obniżało).

### Kąt nachylenia oparcia i siedziska

Przekręć pokrętkę po lewej stronie siedziska do przodu, odchył się do tyłu do momentu uzyskania odpowiedniego kąta nachylenia. Przekręcając pokrętkę do tyłu blokujemy w wybranej pozycji (oparcie odchyła się synchronicznie z siedziskiem).

### Regulacja wysokości podłokietnika

Wciśnij przycisk tóż pod nakładką podłokietnika, podłokietnik będzie podnosił się. Zwolnienie przycisku, blokada w wybranej pozycji. Model 3D nakładka podłokietnika obracana na boki wewnątrz i na zewnątrz oraz do przodu i do tyłu.

### Regulacja oporu odchylenia oparcia

Przekręć śrubę pod siedziskiem w jedną bądź w drugą stronę (oparcie będzie łatwiej lub mocniej się odchylać)

### Wysuw siedziska

Usiądź na siedzisku, podciągnij pierwszą dźwignię z lewej strony ku górze, wysuń siedzisko do przodu.

Fotele, ze względu na opatentowany sposób wyprofilowania oparcia **czynnie wymuszają** wyprostowaną pozycję podczas siedzenia. **Specjalny kształt siedziska** pozwala na **odciążenie guzów kulszowych**, co powoduje powrót miednicy do prawidłowej fizjologicznej pozycji.

**Uwaga:** Prosimy pamiętać, że fotel należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Jest on przeznaczony dla jednej osoby. Nie wolno na nim stawać. Nie należy pozostawiać w miejscach o dużej wilgotności powietrza czy też w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła.

Maksymalne obciążenie dla fotela wynosi 130 kg.

Demontaż lub montaż jakichkolwiek elementów fotela może spowodować utratę gwarancji, oraz niewłaściwe działanie medyczne fotela.

Producent udziela 24 miesięcy gwarancji na elementy mechaniczne oraz wady ukryte powstałe w momencie produkcji.

Reklamacje należy zgłaszać pod nr tel. 0-12 411 22 23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

System, wedlug którego konstruowane są nasze fotele, został zgłoszony w urzędzie patentowym. Fotele są zarejestrowane jako Wyrób Medyczny w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie.



**KULIK  
SYSTEM**

WWW.KULIKSYSTEM.COM

**KRZESŁO PROF. REHABILITACYJNE K4  
MODEL ELEGANCE**

## INFORMACJE O PRODUKCIE / INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU



System podtrzymywania  
szyjnego i piersiowego  
odcinka kręgosłupa.

System odciążenia  
kręgosłupa

System wentylacji  
organów miednicy.

System podtrzymywania  
i korekcji lędźwiowego  
odcinka kręgosłupa.

**BIURO HANDLOWE KULIK SYSTEM**  
ul. Kasprowicza 32 31-523 Kraków



Przed użyciem zapoznaj się z opisem produktu, instrukcją użytkowania oraz treścią, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych oraz informacje dotyczące używania wyrobu medycznego. Stosowanie podanych wskazań przy oddzielnej eksploatacji produktu pozwoli na jego długotrwałe i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie. Wydanie II CZERWIEC 2015.